

CRI
CUUM

FETTABBAU DURCH KRYOLIPOLYSE

Schlank durch Kälte



KÖRPERKONTURIERUNG durch KÜHLTECHNOLOGIE



MEDIZINISCHE GERÄTE FÜR DIE APPARATIVE KOSMETIK

Acosmed bietet Ihnen eine Vielzahl an professionellen Technologien für die Bereiche medizinische Ästhetik, Dermatologie und apparative Kosmetik vom spanischen Marktführer TermoSalud. Acosmed ist exklusiver Vertriebspartner von TermoSalud für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Wir sind besser. Unsere Kunden profitieren von einer persönlichen Beratung und einem exzellenten Service sowie einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis. Mit unseren Technologien erzielen Sie Spitzenergebnisse und erreichen schnell den Return-on-Invest.

Im persönlichen Gespräch klären wir Ihre Anforderungen und unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot. Unsere Geräte können Sie kaufen oder finanzieren. Für jede Anforderung bieten wir die perfekte Lösung.

Ihr persönlicher Ansprechpartner ist Bastian Stöhr:
service@acosmed.de , Tel.: 0171 / 275 587 7

FÜHRENDES UNTERNEHMEN MIT GARANTIRTER TECHNISCHER EXPERTISE

CRIOCUUM wird zu 100 % in Spanien hergestellt. In die Entwicklung des Geräts sind das hohe Innovationsniveau, die umfangreiche Erfahrung und die Effizienz bei der Herstellung von medizinisch-ästhetischen Geräten eingeflossen, die sich TermoSalud im Laufe der letzten drei Jahrzehnte erarbeitet hat.

Ein hochqualifiziertes Expertenteam, das sich mit Herzblut und hochspezialisiertem Fachwissen für Innovationen und Neuentwicklungen einsetzt, hat TermoSalud eine führende Position im Markt für medizinisch-ästhetische Geräte gesichert. Dank eines umfangreichen Partner-Netzwerks im In- und Ausland ist TermoSalud immer am Puls der Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden – und damit in der Lage, ihnen stets die marktweit innovativsten Anwendungen zur Verfügung zu stellen.

TermoSalud hat die anspruchsvollsten nationalen wie internationalen Zertifizierungen für die Herstellung von qualitativ hochwertigen medizinischen Geräten erworben und garantiert Technologien für die apparative Kosmetik auf höchstem Niveau.

Wenn Sie Fragen zu CRIOCUUM haben, steht Ihnen unser technischer Support im Handumdrehen zur Seite. Mit Acosmed als zertifiziertem Partner von TermoSalud haben Sie die technische Unterstützung stets an Ihrer Seite – bei Problemen ist eine unmittelbare Reaktion garantiert.



CRIO
CUUM
FETTABBAU DURCH KRYOLIPOLYSE



Die Kälte, die Fettzellen reduziert

CRIOCUUM ist ein innovatives Gerät, das mit der KRYOLIPOLYSE, einem nicht-invasiven Verfahren zur Beseitigung des Unterhautfettgewebes durch Kälteanwendung, arbeitet. CRIOCUUM isoliert und kühlt die Fettdepots selektiv, wobei Temperatur und Behandlungsdauer sicher und effektiv gesteuert werden.

CRIOCUUM verfügt über verschiedene Handstücke, die sich für den Einsatz auf unterschiedlichen Körperarealen eignen. Der Applikator erzeugt einen einstellbaren Vakuumeffekt, der das Fettgewebe in einem Hohlraum ansaugt und selektiv mit Kälte behandelt.

CRIOCUUM baut Fettpolster dauerhaft und nicht-invasiv ab.



K Ö R P E R K O N T U R I E R U N G
durch K Ä L T E T E C H N O L O G I E

SO FUNKTIONIERT DER FETTZELLENABBAU MITTELS KRYOLIPOLYSE

Bei der Kryolipolyse wird das Fettgewebe kontrolliert und über einen bestimmten Zeitraum hinweg gekühlt. Mehrere klinische Studien haben gezeigt, dass eine intensive Kälteeinwirkung auf ein bestimmtes Körperareal mit Fettansammlungen eine Entzündung des Unterhautfettgewebes hervorruft und den Grundumsatz erhöht, wodurch die Adipozyten oder Fettzellen zerstört werden.

Durch die **KRISTALLISIERUNG** der in den Fettzellen enthaltenen Lipide kommt es zu einem kontrollierten Zelltod (Apoptose). Innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs (zwischen -10°C und 0°C) verfestigt sich das Fett und kristallisiert. Das umliegende, wasserhaltige Gewebe kristallisiert hingegen nicht und bleibt daher unbeschädigt.

Durch die Zellapoptose werden funktionsuntüchtige Zellen beseitigt und überschüssige normale Zellen entfernt, was für das korrekte Funktionieren des Körpers unerlässlich ist.

Die Beseitigung dieser Zellen findet in diesem Fall auf natürliche Weise statt.

Diese Technik ist die einzige, bei der die Fettzellen ohne chirurgischen Eingriff durch Apoptose zerstört werden, so dass das beseitigte Fettgewebe nicht wieder aufgebaut werden kann.



FETTABBAU DURCH
KRYOLIPOLYSE

K Ö R P E R K O N T U R I E R U N G



BEHANDLUNGSPHASEN

Die fortschrittliche Forschung, die der Entwicklung der CRIOCUUM-Behandlungsphasen zugrunde liegt, garantiert eine sehr hohe Wirksamkeit beim Abbau von Fettablagerungen.

PHASE 1

Kühlung

Durch Aufsetzen des Applikators auf das zu behandelnde Areal wird der Fettabbau eingeleitet.



PHASE 2

Sofortiges Ansprechen

Die Kälte bewirkt eine Reaktion der Fettzellen im behandelten Areal.



PHASE 3

Natürliche Ausscheidung

Die Behandlung beseitigt die Fettzellen auf natürliche Weise.




PHASE 4

Ergebnisse

Ein wirksames Endergebnis ist nach 8 bis 12 Wochen zu sehen.



Funktionalität und Präzision auf dem Weg zu Ihrer Traumfigur

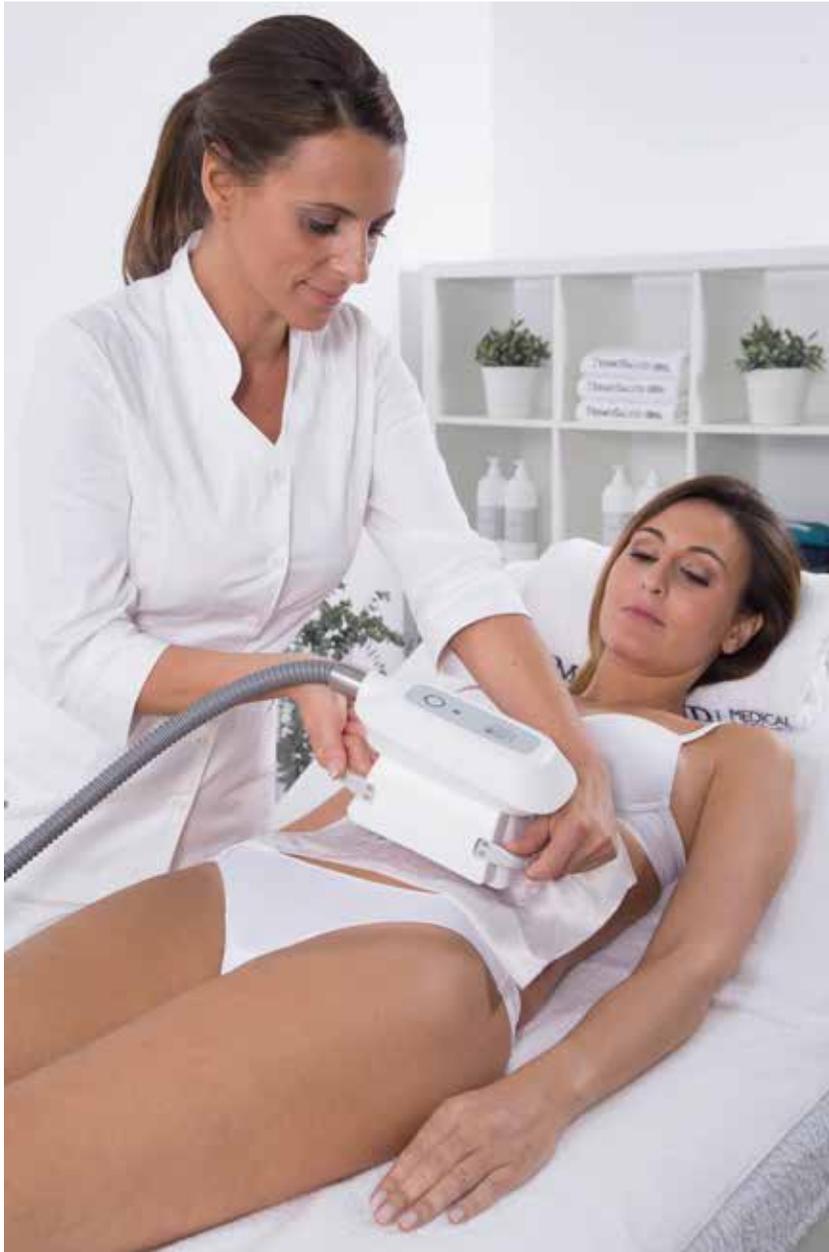

CRIOCUUM ist ein medizinisch-ästhetisches Gerät, das sicher und einfach in der Anwendung ist. Das Gerät ermöglicht die Behandlung mit zwei Handstücken gleichzeitig, optimiert auf diese Weise den Behandlungsablauf und die in jeder Sitzung erzielten Ergebnisse.

CRIOCUUM misst zunächst die Hautfalte des Fettgewebes und passt die Saugleistung entsprechend an – es stehen 10 verschiedene Intensitätsstufen zur Verfügung.

Die Temperatur des Geräts kann auf bis zu -10°C eingestellt werden und sollte an das behandelte Areal und die Abmessungen der Fettfalte angepasst werden.

Mit der intuitiven Software können Sie die genauen Funktionseinstellungen für optimalen Erfolg und höchste Sicherheit der Behandlung vornehmen.

Parameter wie Zeit, Temperatur und Saugstärke lassen sich auf dem CRIOCUUM-Touchscreen einstellen und werden dann während der gesamten Behandlung auf dem Bildschirm angezeigt.


CRIOCUUM verfügt nicht nur über voreingestellte Behandlungsprogramme, sondern bietet auch die Möglichkeit, eigene Programmeinstellungen vorzunehmen.



INTUITIVE SOFTWARE
FÜR DIE BEHANDLUNGS-
KONFIGURATION

VIELSEITIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN FÜR ALLE BEHANDLUNGZONEN


Die Handstücke haben unterschiedliche Größen und Funktionen und sind mit verschiedenen Sensoren versehen, die Saugstärke und Hauttemperatur laufend überwachen und so eine wirksame, sichere und schmerzfreie Behandlung gewährleisten. Dank ihres funktionalen und innovativen Designs können die Handstücke in den verschiedenen Körperarealen noch effektiver eingesetzt werden.

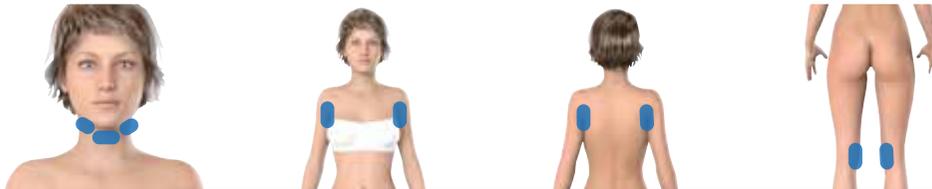


Anwendung am Doppelkinn, an den Armen, an der Innenseite des Knies und unterhalb des Schulterblatts



Anwendung im Bauchbereich, unter Gesäß und Rücken, an der Innenseite der Knie und Arme

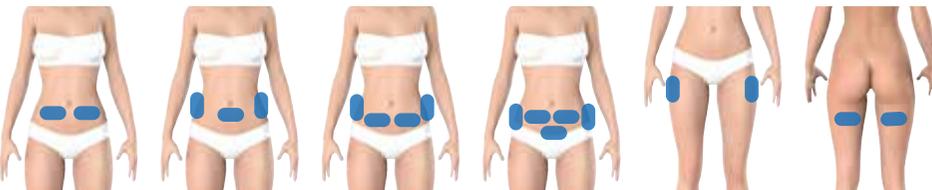

Anwendung am Ober- und Unterbauch sowie unter Gesäß und Hüften

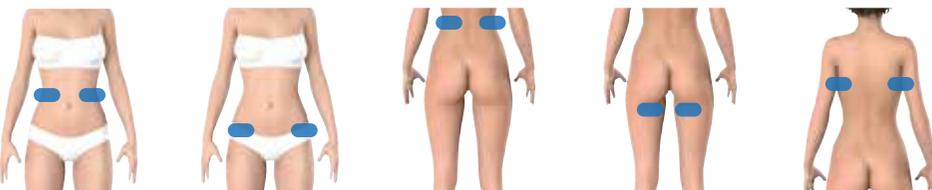

Anwendung an Taille und Hüften, unter dem Gesäß, an den Außenseiten der Oberschenkel, an den Seiten und im Bereich unterhalb des Schulterblatts

CRIOCUUM LARGE FOLD

Geeignet für die Messung von Fettfalten von mehr als 35 mm



CRIOCUUM SMALL FOLD

Geeignet für die Messung von Fettfalten von weniger als 35 mm



CRIOCUUM CURVED CONTOUR

Geeignet für unebene Areale und die Messung von Fettfalten von weniger als 35 mm



CRIOCUUM MINI FOLD

Geeignet für die Messung von Fettfalten von weniger als 35 mm, speziell für sehr kleine Areale entwickelt



2
MITEINANDER
KOMBINIERBARE
THERAPIEN



FETTABBAU
bis zu
45 %

STEIGERUNG DER
HAUTELASTIZITÄT
um
74 %

KLINISCH
NACHGEWIESENE
ERGEBNISSE

FORTSCHRITTLICHE ERGEBNISSE FÜR DIE KÖRPERKONTURIERUNG

CRIOCUUM und VMAT

CRIOCUUM ist das Ergebnis der fortschrittlichen Forschung und Entwicklung des TermoSalud F&E-Teams, wobei unter Einhaltung strenger Sicherheitskontrollen eine detaillierte Analyse aller Variablen stattfindet, die für die gewünschte Wirkung auf das Gewebe wichtig sind. Auf diese Weise wird optimale Wirksamkeit und Sicherheit in allen Behandlungen garantiert.

In Kombination mit VMAT (akustische Schockwellen) die perfekte Behandlung für einen deutlich effektiveren Fettzellenabbau.

Studien haben gezeigt, dass die Kombination von Kryotherapie und akustischen Schockwellen nicht nur einen größeren Fettzellenabbau garantiert, sondern auch die Lymphdrainage anregt und die Haut strafft.

Je nach Dicke des vorhandenen Fettgewebes beträgt die durchschnittliche Fettreduktion zwischen 3 und 15 mm (zwischen 25 % und 45 % des Gewebes). Sichtbare Ergebnisse werden bereits 15 Tage nach der ersten Sitzung erzielt, wobei die endgültigen Ergebnisse erst nach mindestens 6 Wochen beurteilt werden können.

ERGEBNISSE DER KRYOLIPOLYSE			
FETTGEWEBE	1. Sitzung/45 Tage	2. Sitzung/90 Tage	3. Sitzung/35 Tage
10 mm	-3 mm	-	-
20 mm	-6 mm	-10 mm	-
30 mm	-6 mm	-10 mm	-14 mm



HOHE THERAPEUTISCHE WIRKSAMKEIT



TermoSalud verfügt über ein hochqualifiziertes Ausbildungs- und klinisches Überwachungsteam, das das therapeutische Ansprechverhalten der von unserer F&E-Abteilung entwickelten Geräte überprüft und ihre Anwendungsrichtlinien entsprechend anpasst, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Die Produktionskriterien für dieses Gerät basieren auf der umfangreichen Erfahrung von TermoSalud bei der Entwicklung von Behandlungen zur Fettreduzierung mittels Kryotherapie. Erfahrung ist die beste Garantie.

CRIOCUUM entspricht den anspruchsvollen Qualitätszertifizierungen **ISO 9001** und **ISO 13485** für die Herstellung von Medizinprodukten.





TECHNISCHE DATEN

Energieversorgung:	230 VAC, 50/60 Hz 110 VAC, 50/60 Hz (optional)
Maximaler Verbrauch:	740 VA
Benutzeroberfläche:	Farbbildschirm, 10,2 Zoll, Touchscreen, LED-Hintergrundbeleuchtung

LEISTUNGSMERKMALE DES FETTABBAUS MITTELS KRYOLIPOLYSE

Einstellbare Temperatur:	-10 °C bis 5 °C
Einstellbare Saugstärke:	100 bis 250 mbar

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN DES GERÄTS

Betriebsumgebungstemperatur:	20–30 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport:	0–40 °C
Luftdruck:	700–1060 hPa
Relative Luftfeuchtigkeit:	<80 °C (ohne Kondensation)

Abmessungen:	60 cm (H) x 50 cm (L) x 66 cm (B)
Gewicht:	27 kg



MADE IN EUROPE



KLINISCHE STUDIEN

Sie möchten mehr wissen? Unsere klinischen Studien belegen die einzigartige Leistungsfähigkeit von **CRIOCUUM**.

Jetzt anfragen: info@acosmed.de



In unserer Medical Aesthetic Academy in Düsseldorf-Hilden präsentieren wir Ihnen alle Technologien und schulen Ihre Mitarbeiter. Natürlich können Sie selbst alle Anwendungen vor Ort ausprobieren.

Acosmed Medical Aesthetic Academy
Mittelstraße 62a | 40721 Hilden
Termine nach Vereinbarung.



Acosmed GmbH
Mittelstraße 62a | 40721 Hilden
Tel.: 0171 / 275 587 7 | info@acosmed.de

Hinweis: Für unsere Unterlagen nutzen wir Bilder, Daten und Studien von TermoSalud. Alle klinischen Studien wurden von TermoSalud durchgeführt und dokumentiert.



HANDSTÜCKE

	2 x HANDGERÄT LARGE FOLD
	2 x HANDGERÄT SMALL FOLD
	2 x HANDGERÄT CURVED CONTOUR
	1 x MINI FOLD

ENTHALTENES ZUBEHÖR

	1 x CRIO GEL
	1 x CRIOGEL PAD (25 Stück)
	1 x HAUTFALTEN-MESSGERÄT
	1 x MASSBAND
	1 x MESSBANNER
	2 x CRIOCUUM-KISSEN



in Zusammenarbeit erstellt mit

