

# ZIONIC rollactive RF





## MEDIZINISCHE GERÄTE FÜR DIE APPARATIVE KOSMETIK

Acosmed bietet Ihnen eine Vielzahl an professionellen Technologien für die Bereiche medizinische Ästhetik, Dermatologie und apparative Kosmetik vom spanischen Marktführer TermoSalud. Acosmed ist exklusiver Vertriebspartner von TermoSalud für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Wir sind besser. Unsere Kunden profitieren von einer persönlichen Beratung und einem exzellenten Service sowie einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis. Mit unseren Technologien erzielen Sie Spitzenergebnisse und erreichen schnell den Return-on-Invest.

Im persönlichen Gespräch klären wir Ihre Anforderungen und unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot. Unsere Geräte können Sie kaufen oder finanzieren. Für jede Anforderung bieten wir die perfekte Lösung.

Ihr persönlicher Ansprechpartner ist Bastian Stöhr:  
**service@acosmed.de , Tel.: 0171 / 275 587 7**

## GARANTIERTE EXPERTISE

ZIONIC wird zu 100 % in Spanien vom führenden Hersteller TermoSalud hergestellt: Die Verfahren, mit denen TermoSalud bereits seit drei Jahrzehnten seine medizinisch-ästhetischen Geräte herstellt, zeichnen sich durch das hohe Maß an Innovation und Effektivität eines souveränen Marktführers aus.

Ein hochqualifiziertes Expertenteam, das sich mit Herzblut und hochspezialisiertem Fachwissen für Innovationen und Neuentwicklungen einsetzt, hat TermoSalud eine führende Position im Markt für medizinisch-ästhetische Geräte gesichert. Dank unseres umfangreichen Partner-Netzwerks im In- und Ausland ist TermoSalud immer am Puls der Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden – und damit in der Lage, ihnen stets die marktweit innovativsten Anwendungen zur Verfügung zu stellen.

TermoSalud hat die anspruchsvollsten nationalen wie internationalen Zertifizierungen für die Herstellung von qualitativ hochwertigen medizinischen Geräten erworben und garantiert Technologien der Spitzenklasse.

Mit Acosmed als zertifiziertem Partner von TermoSalud haben Sie die technische Unterstützung stets an Ihrer Seite – bei Problemen ist eine unmittelbare Reaktion garantiert.





ZIONIC rollactive RF



## EFFEKTIVITÄT

ZIONIC kombiniert eine Behandlung aus aktiver Tiefen-Rotationsmassage (MARP) mit resistiver Radiofrequenz, die schnelle Ergebnisse und höchste Effizienz bei der Behandlung von Cellulite, Körpermodellierung, schlaffer Haut sowie bei der Neukonturierung und der Steigerung der Muskelspannung garantiert.

## VIELSEITIGE EINSATZGEBIETE

Bei ZIONIC kann sowohl die Energie der resistiven Radiofrequenz als auch die Rotation bei der aktiven Tiefen-Rotationsmassage individuell, sicher und effektiv an die Bedürfnisse des jeweiligen Patienten angepasst werden. Auf diese Weise stehen ein und demselben Patienten unterschiedliche Behandlungen zur Verfügung.

## SICHERHEIT

Die nicht-invasive ZIONIC-Behandlung bringt mechanische Energie auf das Gewebe auf – und das ganz ohne Zug. Der zweite Teil der Behandlung besteht aus einer resistiven Radiofrequenz-Therapie, die die Frequenzen gezielt auf den zu behandelnden Bereich konzentriert.

## RENTABILITÄT

Im Vergleich zu anderen Technologien zeichnet sich ZIONIC durch seine hohe Rendite aus, denn es ist die einzige Technologie, die sowohl eine resistive Radiofrequenz-Therapie als auch eine aktive Tiefen-Rotationsmassage durchführt und auf diese Weise schnelle und effektive Ergebnisse erzielt. Darüber hinaus optimiert und verkürzt ZIONIC die Behandlungsdauer und garantiert einzigartige Resultate.



**ZIONIC** rollactive RF



MARP  
+ RF

AKTIVE  
TIEFEN-  
ROTATIONS-  
MASSAGE

ZIONIC ist die erste Technologie, die mit einem Aufsatz sowohl die aktive Tiefen-Rotationsmassage (MARP) – wobei mechanische Energie in hoher Intensität auf das Bindegewebe aufgebracht wird – als auch eine resistive Radiofrequenz-Behandlung durchführen kann, bei der die abgestrahlte Frequenz in Wärmeenergie umgewandelt wird.

Das exklusive und patentierte MARP-System sorgt für eine wirkungsvolle und sichere biomechanische Behandlung, die das Muskel- und Hautgewebe tiefgehend stimuliert und den physiologischen Heilungsprozess des Gewebes anregt.

Die Kombination aus MARP und RF garantiert und steigert die bei den einzelnen Behandlungen erzielten Ergebnisse exponentiell.



ZIONIC erzeugt einen zweifachen thermischen und mechanischen Effekt, der in drei unterschiedlichen Weisen auf das behandelte Gewebe wirkt und gleichzeitig die höchste Wirksamkeit eines jeden Behandlungsschritts sicherstellt.

#### **WIRKUNG AUF DIE HAUT**


Die Behandlung aktiviert die Fibroblasten, indem sie ihre Ausbreitung ankurbelt und die Bildung unter anderem von neuem Kollagen, Elastin und frischen Hyaluronfasern fördert: Auf diese Weise erhält die Haut ihre Dichte und Elastizität zurück und bekommt ein frischeres Aussehen.

#### **WIRKUNG AUF DIE MUSKELN**

Die mechanische Aktivierung der Myofibroblasten (spezielle Fibroblasten des Muskelgewebes) fördert die Bildung von neuen Myosin- und Aktinfasern. Dabei handelt es sich um Strukturproteine, die für die Muskelkontraktion wesentlich sind und zur Steigerung, Aufrechterhaltung und Regulierung der Muskelspannung beitragen.

#### **WIRKUNG AUF DIE GEFÄSSE**

Die MARP-Behandlung erhöht die Temperatur des behandelten Areals. Sie steigert die periphere Durchblutung und sorgt für eine bessere Sauerstoffversorgung des Gewebes und den Abbau von Abfallstoffen. ZIONIC unterstützt den Venenrückfluss und fördert auf diese Weise auch die Lymphzirkulation.

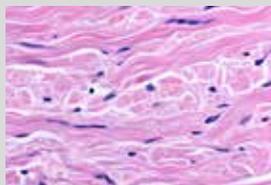

Haut/  
Fibroblasten



Muskeln



Gefäße



**ZIONIC** rollactive RF

# BEHANDLUNGEN





### STRAFFUNG

ZIONIC regt die Bildung von Kollagen- und Elastinfasern an und steigert die Produktion neuer Elastinfasern. Die Haut wird besser mit Feuchtigkeit versorgt und gewinnt an Dichte.



### FETTZELLENABBAU

Die resistive Radiofrequenz kurbelt den Stoffwechsel der Fettzellen an und verbessert ihre Funktion. Die MARP-Behandlung fördert den Abbau angestauter Abfallstoffe und Flüssigkeiten. Das Fettgewebe verdichtet sich, was zu einer langanhaltenden, fettreduzierenden Wirkung führt.



### STEIGERUNG DER MUSKELSPANNUNG

ZIONIC versorgt das Bindegewebe mit Nährstoffen und Sauerstoff und steigert auf diese Weise die Muskelspannung.

Darüber hinaus unterstützt es den Venenrückfluss und fördert damit auch die Lymphzirkulation.




### NEUMODELLIERUNG

ZIONIC fördert die Ausscheidung der von den Fettzellen freigesetzten Flüssigkeiten, Fette und Abfallstoffe über das Lymphsystem.



### CELLULITE

ZIONIC wirkt außerdem effektiv gegen Cellulite (Grad I, II, III), indem es Fettzellen aufspaltet und unerwünschte und unästhetische Orangenhaut beseitigt.

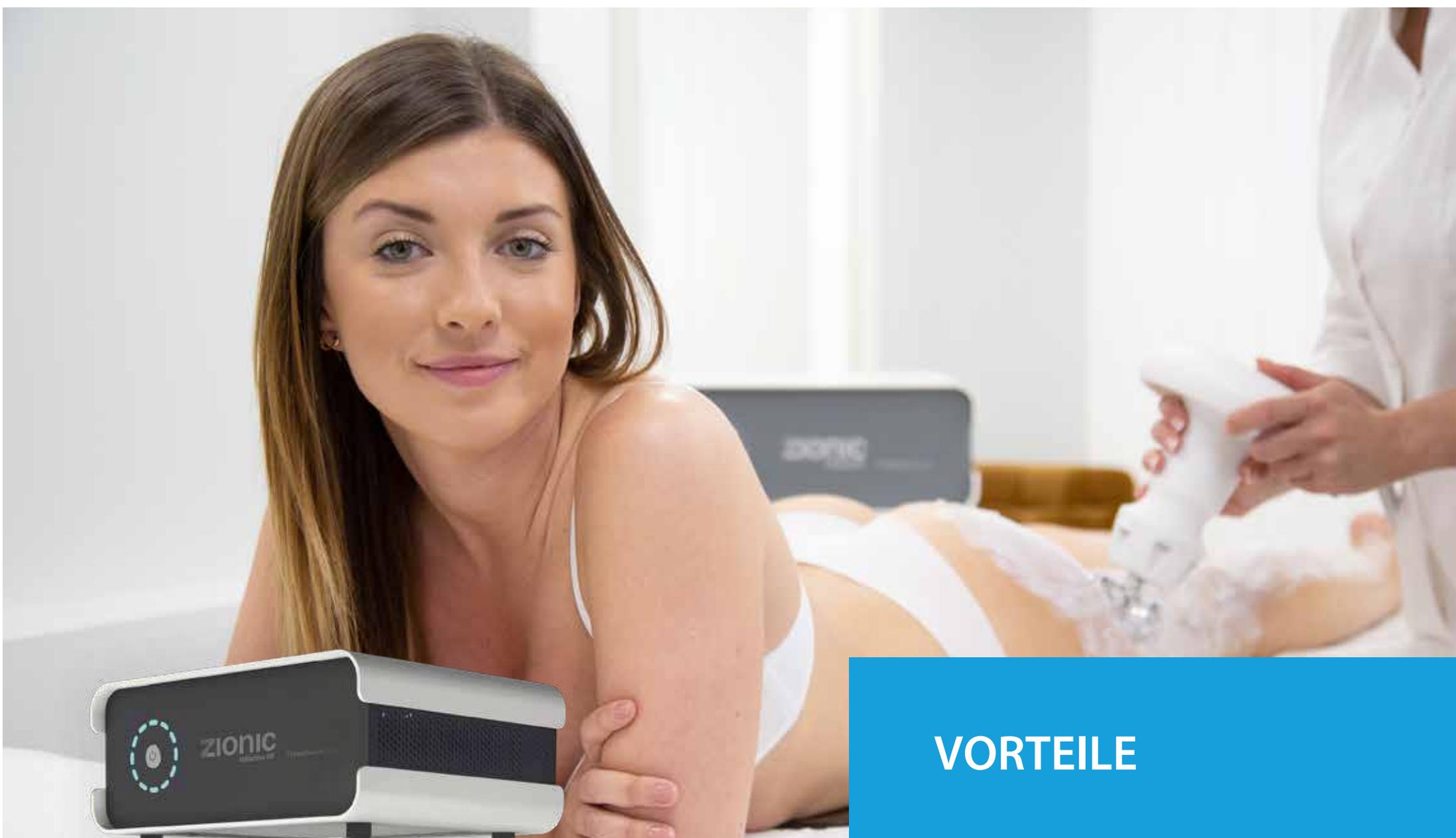

# VORTEILE



- Schnelle Bildung von Kollagen und Elastin
- Anregung des Fettstoffwechsels und Verdichtung des Fettgewebes
- Fördert die Ausscheidung von Giftstoffen und Abfallprodukten durch die Aktivierung des Lymphsystems und verbessert die Bildung neuer Blutgefäße
- Anregung der Durchblutung
- Bessere Versorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff
- Abbau von Fettzellen

EMPFOHLEN FÜR:

Cellulite (Grad I, II, III)  
 Verschlankeung der Kontur  
 Straffung  
 Neumodellierung  
 Steigerung der Muskelspannung



BEREICHE:

Bauch  
 Seiten  
 Oberschenkel  
 Gesäß  
 Abduktoren  
 Arme  
 Rücken



**ZIONIC** rollactive RF

# Innovative Technologie

## ZIONIC rollactive RF

Austauschbare Applikatoren in zwei unterschiedlichen Größen mit TIEFENWIRKUNG, einstellbare Drehgeschwindigkeit.



**MAX. TIEFENWIRKUNG**  
GROSSE TIEFE  
Ø 19 mm



**TIEFENWIRKUNG**  
MITTLERE TIEFE  
Ø 30 mm



# Ergonomischer, leichter und weitgehend geräuschfreier Aufsatz

ZIONIC wurde im Einklang mit den strengsten europäischen Normen entwickelt und konstruiert, die die Verlässlichkeit, Funktionsweise und Sicherheit von ZIONIC garantieren.

Das ZIONIC-Handstück ist das Ergebnis ausführlicher Analysen der bewährten F+E-Abteilung in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten für bahnbrechende manuelle Massagetechniken. Es besteht aus Materialien mit geringer Dichte und Legierungen mit einer hohen mechanischen Widerstandskraft.


Das ZIONIC-Handstück ist im Inneren mit einem kernlosen Getriebemotor mit kleinem Trägheitsmoment ausgestattet: präzise, klein und leicht, Top Qualität Made in Europe, führend bei Anwendungen im Bereich Medizin, Robotik und Raumfahrttechnik. Dank dieser Technologie ist der Behandlungsaufsatz im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten kleiner, leichter und fast geräuschlos.

Der Temperatursensor überwacht die Temperatur der behandelten Haut durchgehend und gewährleistet auf diese Weise höchste Sicherheit und Wirksamkeit.

## Steuerungs- und Kontrollbildschirm

Ist direkt im Handgerät integriert, was die laufende Anpassung an die Leistungsparameter der Radiofrequenz und die MARP-Drehzahl ermöglicht. Die behandelnde Fachkraft ist daher stets über den Behandlungsverlauf informiert und kann jederzeit eingreifen.


Der Sensor überwacht die Temperatur sowie die Behandlungstiefe und stellt die jeweiligen Parameter in unterschiedlichen Modi grafisch dar: **ECHTZEIT-MODUS** / **ÜBERSICHTSMODUS**.

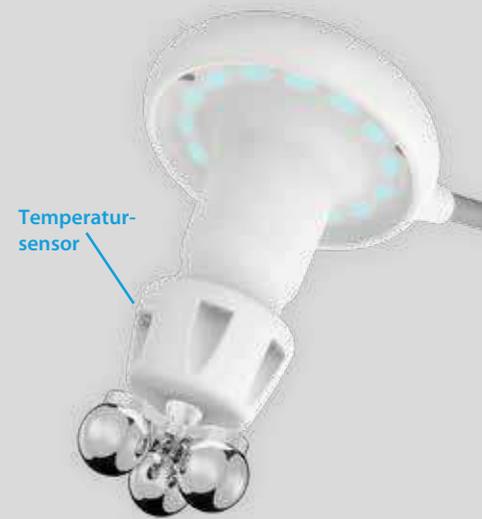

### ECHTZEIT-MODUS

Echtzeit-Anzeige der Temperaturentwicklung während der Behandlung.

Echtzeit-Grafiken, die im Sekundentakt aktualisiert werden, zeigen die Haut-Temperatur in Echtzeit an.



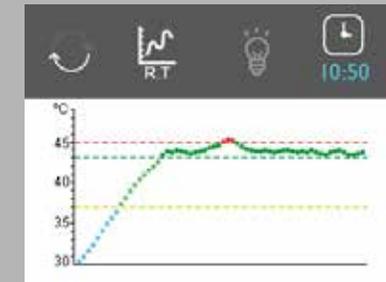


### ÜBERSICHTSMODUS

In diesem Modus wird die Temperaturentwicklung über die Behandlungstiefe hinweg für die Dauer der gesamten Sitzung angezeigt, wodurch beide Parameter (Temperatur und Tiefe) gleichzeitig überwacht werden können.

In diesem Modus erscheint außerdem eine Anzeigeleiste für die Momentanwerte für Temperatur und Tiefe zusammen mit ihrem textuellen Wert.

Der Überwachungsmodus kann in allen Phasen der Behandlung an die Wünsche der behandelnden Person angepasst werden.

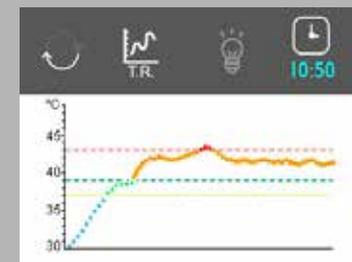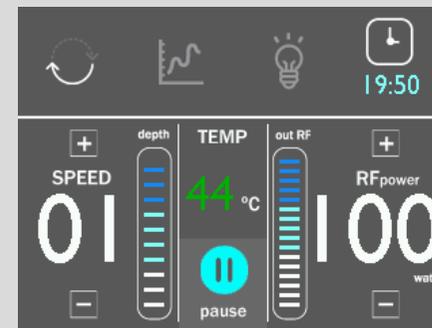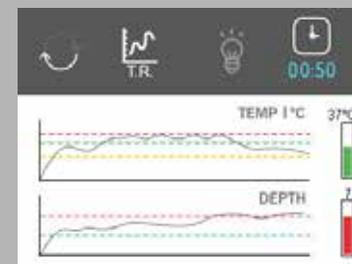



### BESTE ERGEBNISSE

In Kombination mit Bewegung und gesunder Ernährung können dauerhafte Resultate erzielt werden.



### MARP + RF

Höchste Wirksamkeit und Sicherheit




### SPÜRBARE WIRKUNG

ab der ersten Sitzung  
7 verschiedene Behandlungen mit nur einem Gerät



10 DREHSTUFEN

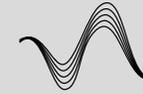


200 W  
RESISTIVE RADIOFREQUENZ



TEMPERATURSENSOR

## Rentabilität für Ihre Praxis/Klinik

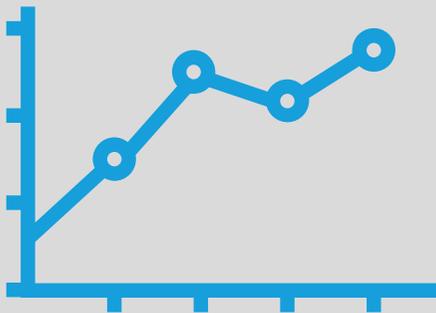

Einkommenssteigerung

- **Kurze Behandlungsdauer (Sitzung à 30/40 min.)**  
Mehr Patientinnen und Patienten können in kürzerer Zeit behandelt werden.
- **Höhere Nutzen für jeden Patienten**
- **Ausweitung des Kundenspektrums**
- **Einfache Wartung des Geräts**
- **Marketing-Set**  
Acosmed unterstützt Sie bei Marketing und Werbung für die Neukundenakquise.
- **Schnelle Amortisierung**  
ZIONIC erzielt einen schnellen Return-on-Invest.

# VORHER/NACHHER



8 Sitzungen



6 Sitzungen



6 Sitzungen



6 Sitzungen



6 Sitzungen



# ZIONIC rollactive RF



## KLINISCHE STUDIEN

Sie möchten mehr wissen? Unsere klinischen Studien belegen die einzigartige Leistungsfähigkeit von **zionic**.

Jetzt anfragen: [info@acosmed.de](mailto:info@acosmed.de)



In unserer Medical Aesthetic Academy in Düsseldorf-Hilden präsentieren wir Ihnen alle Technologien und schulen Ihre Mitarbeiter. Natürlich können Sie selbst alle Anwendungen vor Ort ausprobieren.

**Acosmed Medical Aesthetic Academy**  
Mittelstraße 62a | 40721 Hilden  
Termine nach Vereinbarung.



## TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	230 VAC, 50/60 Hz
	110 VAC, 50/60 Hz (optional)
Maximaler Verbrauch	300 VA
Benutzeroberfläche	Farbbildschirm, 2,8 Zoll, Touchscreen,
LED-Hintergrundbeleuchtung	
IP-Schutzart	IPX0
Klassifizierung	Elektrische Schutzklasse 1, Typ BF

## LEISTUNGSMERKMALE

	MARP		RF
Intensitätsstufen	1 bis 10	Ausgangsfrequenz	500 KHz
Maximales Drehmoment	2,25 Nm Dauerbetrieb / 3 Nm Intervallbetrieb	Maximale RF-Ausgangsleistung	200 W
Maximale Drehzahl	128 U/min.		

## EMPFOHLENE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FÜR DAS GERÄT UND DAS DAZUGEHÖRIGE HANDGERÄT

Umgebungstemperatur für den Betrieb	18–30 °C
Umgebungstemperatur für die Lagerung	keine Einschränkungen
Luftdruck	700 –1.060 hPa
Relative Luftfeuchtigkeit	5–90 %
Aufsätze	Tiefenwirkung, Ø 30 mm
	Max. Tiefenwirkung, Ø 19 mm
Abmessungen	Gerät: 18 cm (H) x 34 cm (L) x 40 cm (B)
	Tisch: 45 cm (H) x 41 cm (L) x 85 cm (B)
Gewicht	Gerät: 8,5 kg
	Tisch: 29,5 kg



**Acosmed GmbH**  
Mittelstraße 62a | 40721 Hilden  
Tel.: 0171 / 275 587 7 | [info@acosmed.de](mailto:info@acosmed.de)



in Zusammenarbeit erstellt mit

Hinweis: Für unsere Unterlagen nutzen wir Bilder, Daten und Studien von TermoSalud. Alle klinischen Studien wurden von TermoSalud durchgeführt und dokumentiert.

**TERMO SALUD** | MEDICAL & AESTHETIC

